


F21 Maverick Xtreme AT

Il piede Maverick Xtreme AT è indicato per utenti molto attivi con grado di mobilità 3-4 e un peso corporeo fino a 166 kg.

Caratteristiche del prodotto:

- Sviluppato per carichi molto elevati
- Il design innovativo della lamina del tallone offre un alto grado di durata e flessibilità senza limitare il ritorno di energia
- La fibra di vetro separata garantisce 16° di intra ed extra rotazione per un miglior adattamento al terreno
- Tutta la struttura della lamina della suola assicura una fase statica fisiologica
- Resistente all'acqua dolce, di mare e con cloro.

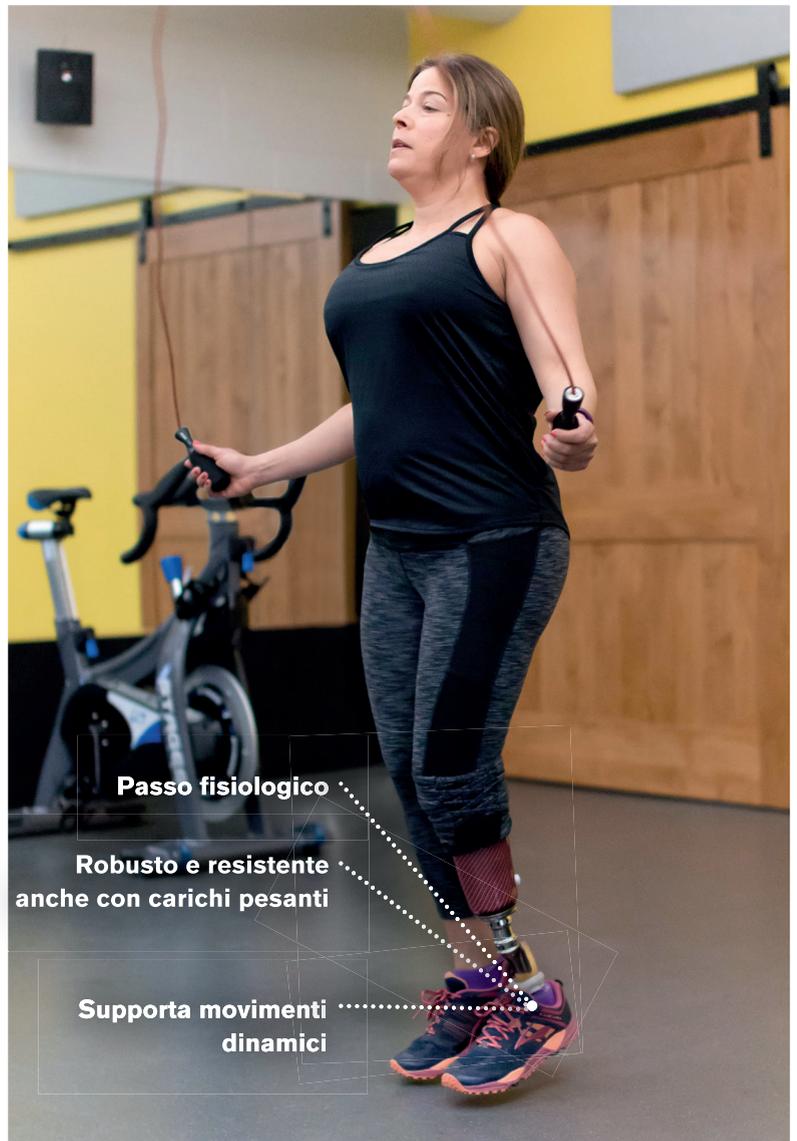

Più di un piede.
Un riferimento.

Dati tecnici

Livello K / Grado di mobilità	3, 4
Peso corporeo massimo	166 kg
Lato	sinistro (L), destro (R)
Misure	23-30 cm
Forma cosmetico	alluce separato, regolare
Colore cosmetico	light, medium, dark
Peso con cosmetico*	798 g
Altezza tacco	10 mm
Altezza strutturale*	170 mm

* Misura di riferimento 26 cm.

Ginocchi meccatronici compatibili (v. pagina seguente per i dettagli)



www.ottobock.com



F21 Maverick Xtreme AT

Modulo d'ordine

Cliente		Indirizzo di spedizione (se diverso dall' indirizzo del cliente)	
Cliente nr.		Cliente nr.	
Ortopedia		Ortopedia	
Via		Via	
CAAP/ Città		CAAP/ Città	
Tecnico Ortopedico		Riferimento cliente	

Selezione della durezza della lamina relativa a

1 peso corporeo e attività e

Peso corporeo	Livello di attività		
	basso	moderato	elevato
44 - 52 kg	1	1	2
53 - 59 kg	1	2	3
60 - 68 kg	2	3	4
69 - 77 kg	3	4	5
78 - 88 kg	4	5	6
89 - 100 kg	5	6	7
101 - 116 kg	6	7	8
117 - 130 kg	7	8	9
131 - 147 kg	8	9	-
148 - 166 kg	9	-	-

2 misura piede

Durezza	Misura piede								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23							***	***	***
24							***	***	***
25							***	***	***
26							***	***	***
27						nessuna restrizione	***	***	***
28							***	**	**
29							***	**	**
30							***	**	**

** Non combinare questa configurazione con un Genium 3B1-2* o 3B1-3*

*** Non combinare questa configurazione con un Genium 3B1-2* o 3B1-3* per peso corporeo > 125 kg

Codice articolo modulo di piede

Codice articolo	Durezza	Misura	Configurazione avampiede
F21 - 00 - 0	A	A	-
	Durezza	Misura (cm)	Configurazione avampiede
	1-9	23, 24, ..., 30	RU regolare, universale SL alluce separato, sinistro SR alluce separato, destro

Contenuto della spedizione

- F21* Maverick Xtreme AT
- 2F11=1 Set di cunei del tallone
- Calzino nero di protezione Spectra
 - 23-25 cm: S0-NPS-20030-00
 - 26-28 cm: S0-NPS-20035-00
 - 29-30 cm: S0-NPS-20040-00

Accessori & parti di ricambio

- SL=SPECTRA-SOCK7 Calzino di protezione nero Spectra
- ACC-00-10300-00 Calzante per rimozione cosmetico

Codice articolo cosmetico

Codice articolo	Forma cosmetico	Misura	Colore	Avampiede	Lato
FTC	A	1		4	-
	Forma cosmetico	Misura (cm)	Colore	Avampiede	Lato
	2 alluce separato	23, 24, ..., 30	L chiaro	R regolare	L sinistro
	3 regolare		M medio	S alluce sep.	R destro
			D scuro		

Cosmetici disponibili

- FTC-3A-1*: Cosmetico Maverick regolare (senza cap)
- FTC-2A-1*: Cosmetico Maverick alluce separato (senza cap) - disponibile nelle misure 23-28 cm