

SOFTWHEEL

La ruota con gli
ammortizzatori
per una guida
più soft e con
meno dolore.

L'assorbimento dei colpi quando ti serve

Grazie all'engineering avanzato di SoftWheel, il cerchio rimane sempre rigido, ma i bracci degli ammortizzatori si muovono per assorbire gli shock quando si incontrano degli ostacoli.

Questo porta a una guida più soft, più confortevole, su tutti i tipi di terreno.



Perché le persone in carrozzina hanno necessità di sospensioni?

SALUTE



Aiuta a ridurre il **dolore alla schiena e collo** e a ridurre l'affaticamento giornaliero

SICUREZZA



Dà **stabilità** alla persona nel superamento di ostacoli e rimane **stabile e rigida** sui fondi lisci

CONFORT




Assorbe shock e vibrazioni su tutti i terreni, fornendo **massimo assorbimento**

Sistema brevettato di ruota con ammortizzatori integrati



Ammortizzatori

3 bracci ammortizzati sono inseriti nella ruota per assorbire i colpi e le vibrazioni

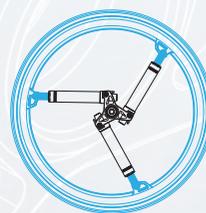

Cerchi rigido

Il cerchio rimane sempre rigido mentre gli ammortizzatori si muovono per assorbire le sollecitazioni



Attivazione automatica

I bracci si comprimono automaticamente quando incontrano un ostacolo o un fondo sconnesso, rimanendo invece rigidi sui terreni lisci



Sospensioni a 360°

I bracci sono equidistanti rispetto al mozzo per essere efficaci indipendentemente dall'angolo della sollecitazione

R1 All around
Both sides

2 X 45° Both Sides

1 X 45° Both Sides

Ø 40 (X2)
Ø 36 (X2)

36 V 0.2

R3

R3

R3

R3

R3

R3

Con SoftWheel puoi semplicemente aggiungere le sospensioni alla tua carrozzina per una guida più confortevole. Le SoftWheels sono facili da mettere e togliere grazie al perno quick-release .

MODELLI

SoftWheel 3

MISURA:
24" o 25"

CERCHIO:
Alluminio AL 6061 T6

MOZZO:
AL 6061 T6

PORTATA MASSIMA:
136 kg

PESO DELLA RUOTA:
1900 gr

SoftWheel 3 Carbon

MISURA:
24" o 25"

CERCHIO:
Fibra di carbonio

MOZZO:
AL 6061 T6

PORTATA MASSIMA:
136 kg

PESO DELLA RUOTA:
1600 gr

STAGES

Per massimizzare le performance, le SoftWheel sono disponibili con diverse rigidità (stage), in base al peso della persona e preferenze d'uso.

SoftWheel 3 & Carbon
Stage Peso utilizzatore

A	fino a 50 kg
B	50 – 70 kg
C	70 – 90 kg
D	90 – 136 kg

Consulta il tuo Rivenditore SoftWheel di fiducia per determinare qual è la versione più idonea a te.



Cosa dicono le persone di SoftWheel



Review my
Wheelchair

9.5
AMAZING

“Un miglioramento sensibile”

“Sulle strade lisce vanno che è un piacere e si passa a terreni più irregolari senza alcun sobbalzo...

Riducono gli impatti trasferiti dal telaio alla spina...

SoftWheels offrono ai professionisti un significativo miglioramento.”

Review My Wheelchair
Aprile 2018



“Unaguida più soft”

“Una notevole prodezza dell'ingegneria...

la guida diventa nettamente più soft. Tutti i sobbalzi, le crepe e le buche sui miei percorsi quotidiani si sono ammorbiditi in maniera evidente. Cambiando le ruote, sembrava che la carrozzina avesse le sospensioni integrate.”

New Mobility
Novembre 2017



Per maggiori informazioni:
www.softwheel.technology o
info@softwheel.technology