

ottobock.


Terra Flair Plus

La sicurezza del cuscino a bolle d'aria,
la stabilità della schiuma
e l'adattabilità degli inserti



Quality for life

L'unione del confort delle bolle d'aria, alla stabilità, alla sicurezza e della schiuma Rest Suspension Foam (RSF)

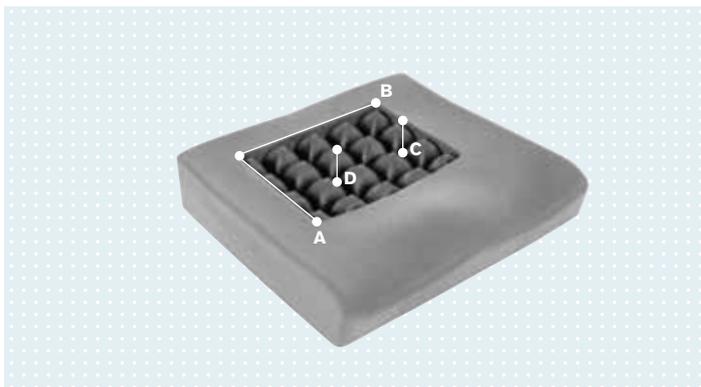

Dimensioni dell'inserto a bolle d'aria

A: Profondità inserto	24 cm
B: Larghezza inserto	30 cm
C: Altezza del bordo in schiuma a contatto con l'inserto	7,5 cm
D: Altezza della cella	7 cm

Caratteristiche

- Inserto a bolle d'aria a valvola singola, di altezza 7 cm, con celle da 5 x 5 cm per massimizzare l'immersione e l'avvolgimento.
- Schiuma brevettata Ottobock Rest Suspension Foam:
 - modificata elasticamente per una eccellente ridistribuzione della pressione;
 - riduce le vibrazioni dovute a terreni sconnessi;
 - concepita per performance ottimali nel tempo.
- Inserti in schiuma da 3 cm in altezza inseriti nella cover (estraibili) per massimizzare l'adattabilità.

Vantaggi

- Ridistribuzione della pressione ottimale nella zona ischiatica, con riduzione delle forze di taglio
- Eccellente stabilità per le attività e i trasferimenti
- Confort di marcia migliorato grazie alla schiuma Rest Suspension Foam (RSF)
- Profilo rastemato della schiuma a contatto con l'inserto (brevetto Ottobock) per minimizzare la variazione di pressione nel passaggio dalla schiuma all'inserto a bolle d'aria

Caratteristiche aggiuntive


- Cover resistente all'acqua in Dartex®
- Cover lavabile a 40°C – 60°C
- Tiretto ad anello e lampo su 3 lati per facilitare la rimozione della cover
- kit di riparazione e pompa in dotazione

Utilizzo

Per utilizzatori che richiedono una massima protezione della cute e richiedono stabilità posturale e supporto (per es. per persone con lesioni spinali, con malattie degenerative o con patologie neurologiche).

Ideale per persone...


- con alto rischio di ulcere da decubito
- che necessitano di più stabilità pelvica
- con prominenze ossee rilevanti a causa di atrofia muscolare
- che patiscono i terreni sconnessi e gli scalini

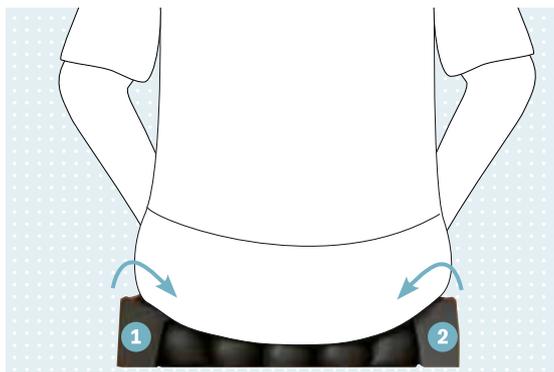

- 1 Supporto dei trocanteri per stabilità posturale aggiuntiva. In caso di sgonfiamento dell'inserto fornisce comunque un sostegno di emergenza
- 2 Bordo rastremato brevettato per limitare le variazioni di pressione nel passaggio da schiuma ad aria



- 1 Inserti in schiuma morbida, alti 3 cm inseriti nelle apposite tasche della cover.
- 2 Tasche in materiale bielastico per consentire l'alloggiamento di inserti con forme e dimensioni diverse. Possono essere ripiegate sui fianchi del cuscino nel caso non si utilizzino gli inserti.

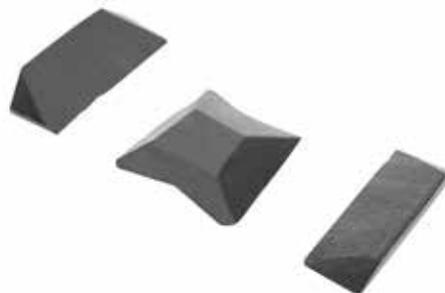

- Portata massima: 150 kg
- Peso del cuscino: ca. 1470 g per la misura 40,5 x 40,5 cm

		Larghezza del cuscino (cm)				
		38	40,5	43	45,5	50,5
Prof. cuscino (cm)	40,5	476C00=SK820	476C00=SK821	476C00=SK825	476C00=SK829	476C00=SK833
	43		476C00=SK822	476C00=SK826	476C00=SK830	
	45,5		476C00=SK823	476C00=SK827	476C00=SK831	476C00=SK834
	50,5		476C00=SK824	476C00=SK828	476C00=SK832	476C00=SK835

Ogni misura ha un profilo specificamente sagomato per consentire una immersione e una stabilità posturale ottimale

Codice del cuscino: 476C00=SK*
 Codice della cover: 476C00=SV*

